

ALViS ALD410, assistants d'écoute



ALD410 Mini-Contour

Léger et discret. Le conduit auditif reste ouvert, ce qui permet une écoute naturelle de l'environnement



ALD410 Intra

Les intras sont plus puissants, mais privilégiés pour une utilisation ponctuelle car moins confortables qu'un mini-contour.

4 programmes d'écoute pour toutes les situations :

P1 : vie courante, conversations en petit groupe, téléphone.

P2 : environnements bruyants, restaurants, repas de famille.

P3 : écoute haute fidélité, musique, télévision, radio.

P4 : écoute à distance, nature, théâtre, conférence.

10 niveaux d'amplification par programme, de +2 à +20 dB.

Pour votre sécurité, le volume des ALD410 est en permanence sous contrôle.

La compression automatique bloque le volume à 99 dB.

Simplicité maximale



Insérer la pile, votre ALD410 émet 3 bips pour indiquer sa mise en route.

Une impulsion courte vers le haut ou le bas sur l'unique bouton de réglage pour monter ou baisser le volume.

Une impulsion longue vers le haut ou le bas sur ce bouton pour monter ou baisser le programme.

Ouvrez le tiroir pile d'un cran : votre ALD410 s'éteint.



ALVIS ALD410 fonctionne avec des piles de type 10 d'une durée de vie maximale de 160 heures.

Disponibles en mini-contours (plus confortables) ou en intra-auriculaires (plus puissants).

Vendus par paire ou séparément. Garantis 2 ans.

Option chasse : mousses d'étanchéité à fixer sur le tube d'écoute pour transformer votre ALD410 en protection auditive pour la chasse, le tir, la musique, les concerts, les travaux bruyants.

Recommandation importante :

Un assistant d'écoute ne doit pas être confondu avec un appareil auditif adapté par un audioprothésiste, seul habilité à traiter la surdité. Il n'est pas destiné à corriger l'audition des malentendants, il ne fait pas l'objet d'une ordonnance. Un amplificateur d'écoute assure une assistance auditive dans des situations particulières : théâtre, parole distante, environnements sonores bruyants, télévision... Il peut être utilisé dans le cas de baisses légères de l'audition, celles qui nuisent à la compréhension. Dans tous les cas, nous vous recommandons de consulter un ORL : la baisse de l'audition, en particulier si elle est unilatérale ou subite, peut être le symptôme de pathologies sérieuses.

1 Au choix Test 30 jours

TEST 1 ALD : 29 €
+ caution 270 €
(2 chèques séparés)

TEST 2 ALD : 49 €
+ caution 500 €
(2 chèques séparés)

OU Achat direct

ACHAT 1 ALD : 299 €
Offerts 6 blisters de 6 piles
au choix 1 spray auriculaire + 3 boîtes de lingettes

ACHAT 2 ALD : 549 € au lieu de 598 €
Offerts : 6 blisters de 6 piles
+ 1 spray auriculaire + 3 boîtes de lingettes

TEST : le chèque de 29 ou 49 € est encaissé pour les frais : piles, reconditionnement, livraison. le chèque de caution n'est encaissé que si vous souhaitez conserver les assistants à l'issue de la période de test. Dans le cas contraire, la caution vous est restituée, après réception des produits (bon de retour affranchi et assuré fourni). Vous pouvez diviser la caution en 2 ou 3 chèques, si vous souhaitez un paiement étalé. ACHAT DIRECT : paiement en 2 ou 3 chèques également accepté.

2 Choix du modèle

Mini contour

Intra-auriculaire

3 Options

OREILLE Gauche
 Droite


OPTION Kit Chasse 25€

TAILLE des tubes
(mini-contours)
 Small
 Medium
 Large

Choisir la taille des Alvis ALD410

Mesurez la conque de votre oreille.

- de 2 cm = Small
2 à 2,5 cm = Medium
+ de 2,5 cm = Large

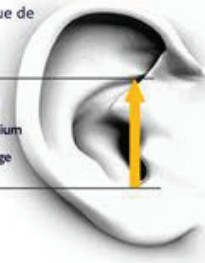

4 Coordonnées

Date : _____

Prénom : _____ Nom : _____

Adresse : _____

Adresse suite : _____

Code postal : _____ Ville : _____

Tel : _____ Email : _____

5 Retournez ce bon avec le règlement à :

ALViS Audio (AB Solutions SAS)
74 rue des Clairs Chênes
91390 Morsang / Orge

Tél : 01 69 46 28 51 (de 9h à 17h)
relation@alvis-audio.com - www.alvis-audio.com



RCS 531 207 876 00016
TVA Intraco : FR67531207876